

PRODUKT UPDATE


Zum Schutz vor unbeabsichtigter Bewegung und zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen von Personal und Patienten, z. B. durch das Einklemmen von Gliedmaßen, sind unsere Liegen, gemäß den neuen Normen, mit einer Sperrfunktion ausgestattet. Die neue Antriebseinheit hat zusätzlich eine Sicherheitsfunktion, dass der Motor bei Widerstand stoppt und keine Zugkräfte mehr aufweist.

Nachfolgend eine kurze Anleitung zur Aufhebung der Sperrfunktion:

1. Drücken Sie die Aufwärtstaste.
Daraufhin hören Sie einen Piepton.

2. Drücken Sie zeitnah die Abwärtstaste
Daraufhin hören Sie zwei Pieptöne.

Mit Ausführung der Schritte 1-2,
in der angegebenen Reihenfolge,
ist Ihre Pflege- und Versorgungsliege
entsperrt.

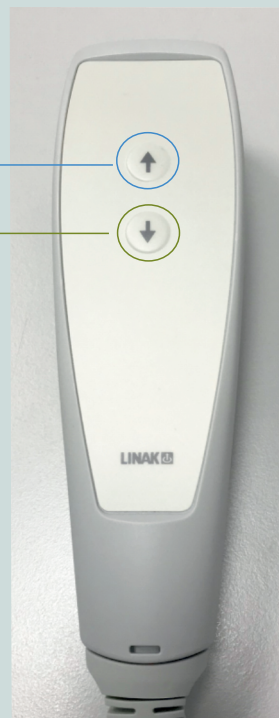

Schritt 1: Ein Piepton

Schritt 2: Zwei Pieptöne

Hinweis:

Sollte sich die Pflege- und Versorgungsliege durch die Ausführung der Schritte 1-2 nicht entsperren lassen, ziehen Sie bitte den Netzstecker der Liege, warten Sie einen Augenblick und verbinden Sie den Netzstecker anschließend wieder mit der Steckdose.

Die Steuerung wird dadurch gebootet.